

Avsändare:		Patient: personnummer, efternamn, förnamn:
Provtagningsdatum:	Remitterande läkare:	Provtagningsansvariges namn och telefonnummer:
Provtagningsställe:		Debiteringsadress om annan än avsändaren:
Anamnes: <input type="checkbox"/> Astma <input type="checkbox"/> Rhinit <input type="checkbox"/> Eksem		Hudtest : _____ Spec.IgE : _____
Önskad analys: <input type="checkbox"/> Kvalster D. farinae		Övriga upplysningar:

PROVTAGNING:

Provtagningsanvisningar ,var god se baksidan.
 Bestämning av kvalsterallergen i inomhusdamm.
 Provtagningsmaterial rekvireras från vårt laboratorium.

Telefonnummer

Allergilab: 031 342 1887
 Kansli: 031 342 4917

Postadress, brev och prover.

Immunologiska laboratoriet
 Box 7193, 402 34 Göteborg

Besöksadress:


Immunologiska laboratoriet
 Guldhedsgatan 10A, 413 46 Gbg
 Tel: 031-342 1887 (Allergilab),
 031-342 4917 (Kansli).

För provtagningsanvisningar
 se baksida av remiss



INSTRUKTIONER FÖR DAMMPROVTAGNING TILL MILJÖANALYS

1) Sätt plastringen (packningen) på dammsugarröret, montera sedan på filterhållaren.

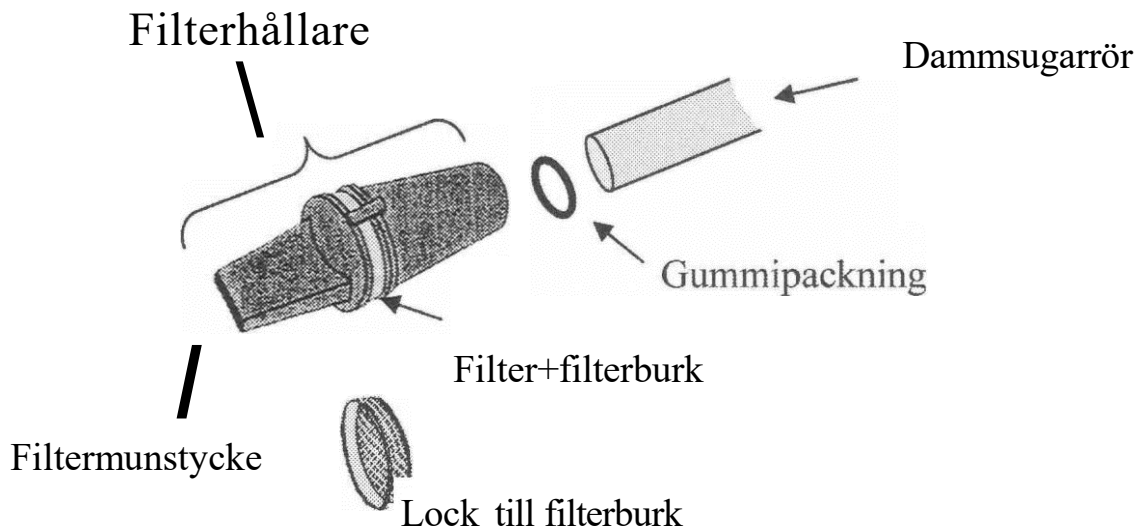

- 2) Dammsug 2,5 minuter på underlakanet.
OBS: Lakanet skall inte vara bytt på 14 dagar.
- 3) Stäng av dammsugaren en stund och ta bort lakanet.
- 4) Dammsug 2,5 minuter på madrassen.

Blir filtret fort igentäppt, stäng då av dammsugaren och vänta ett tag innan du fortsätter.

OBS! Om dammsugaren låter konstigt eller luktar bränt, stäng då av.
Vi ersätter inga dammsugarreparationer.

Kasta aldrig ett filter pga mycket damm, det är vanligt med stora mängder damm på filtren.

När du dammsugit klart tar du bort filterhållaren från dammsugarsslangen så att inget damm flyger ut.

Tag hand om packningen och tag loss filtermunstycket och sätt locket på filterburken. Skriv datum, personnummer och namn på etiketten som sitter på locket.

Lägg alltsammans i en plastpåse och förvara i kylskåp tills det återlämnas. Returnera filterburken och filterhållaren till din vårdcentral eller mottagning.
OBS: Återlämnandet måste ske inom en vecka efter dammsugning!

Instruktion till mottagningen:

Filter och nya filterhållare kan beställas på hos oss på 031 342 1887.

Använda filterhållare går bra att diska för återanvändning.

Allergilab Sahlgrenska Universitetssjukhuset vill endast ha filterburken och tillhörande remiss tillbaka för analys av kvalster (ej filterhållaren).