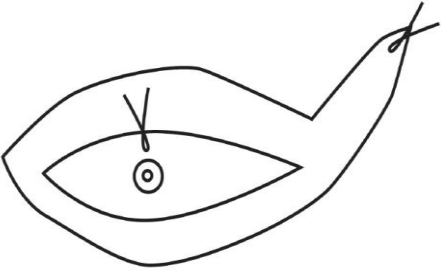
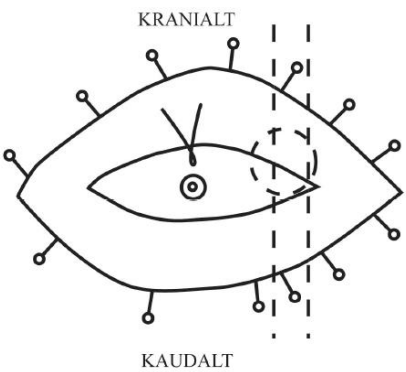


Provtagningsanvisningar Ablatio

Remiss	Remiss ifylls enligt anvisningar ” Remissanvisningar ” REMISS PAD Sahlgrenska sjukhuset
Allmänt	Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och provtagningskärl/objektglas märkas med patientens personnummer (10 siffror) och namn. Observera att provtagningskärl inte får märkas på lock. Anmäl senast dagen innan vilka preparat som ska opereras via fax eller telefon. Kontakta ansvarig BMA vid bröstsektionen om någon patient blir struken från operationslistan. TELEFON DAGTID: 0703-323298
Fixering	Färskvävnadspreparat (ofixerat material) <ul style="list-style-type: none">• Laboratoriet kan omhänderta färskvävnadspreparat (ofixerat material) som levereras vardagar före kl 15:15.• Materialet skall packas nedkyllt med is.• Transport till laboratoriet skall ske skyndsamt (önskvärt inom en timme).• Eventuell preparatröntgen utförs före inlämningen. Fixering <ul style="list-style-type: none">• Övrigt material (icke-färskvävnadskrävande analys) läggs i 4 procent fosfatbuffrad formaldehydlösning (se Övrigt).• Mängden formaldehyd skall vara (5 -)10 gånger provets volym. Viktigt att även preparatets yta är övertäckt.• Material i fixeringslösning förvaras i rumstemperatur. Efter korrekt utförd förhantering (se anvisningar nedan) behövs i regel 24 timmars fixeringstid. Mindre vävnadsbitar (core-biopsier) kan fixeras på kortare tid.• För att undvika överfixeringstider bör preparatet transporteras med nästföljande möjliga tillfälle till laboratoriet för registrering och förvaring (se Transport).

<p>Utförande</p>	<p>Profylaktisk mastektomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suturmärkning och uppnålning av färskvävnadspreparat enligt anvisning (se suturmarkeringar Ablatio) • Inmärkning av korkplatta enligt ovan • Lägg korkplattan med preparatet i en plastpåse med is. • Profylaktiska preparat kan med fördel röntgenundersökas (preparatröntgen – se ovan). <p>Axillpreparat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kan insändas som färskt (ofta vid samtidig mastektomi) eller som prov fixerat i formaldehydlösning. • Om separat insänt preparat utan särskilda önskemål behövs ingen orienterande inmärkning. <p>Suturmarkeringar</p> <p>Ablatio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suture i huden, klockan tolv, ovanför mammillen (se illustration). • Suture i eventuell medföljande axilltopp.  <p>Profylaktisk och/eller subcutan mamillsparande mastektomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sutureinmärkning mot klockan tolv, ovanför mammillen (som ovan) • Sutureinmärkning av retromamillärt vävnadsområde <p>Hantering av preparat som fixeras vid operation</p> <p>Ablatio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montera preparatet på korkplatta • Skär ett snitt tvärs igenom tumören, kranial/kaudial riktning, ned till strax innan fasciahinnan. Vid stora tumörer ska två snitt skäras med ungefär två centimeters mellanrum. • Fixera preparatet. 
-------------------------	---

Övrigt	Preparatröntgen <ul style="list-style-type: none">• Röntgenundersökning av det avlägsnade preparatet (oftast partiell mastektomi/sektoresektat) är önskvärt på preparat med icke palpabla tumörer med/utan föregående indikering av tumören.• Avlägsnad, orienteringsmärkt bröstvävnad uppålas på korkplatta (identitetsmärktes) före undersökningen. Orienteringen skall bevaras vid röntgenundersökningen. Eventuell preoperativ indikering av tumör kvarsitter.• Färskvävnadpreparat transporteras och handlägges skyndsamt (Se ovan).• Röntgenutlåtande samt eventuell pappersutskrift på röntgenbild skall medfölja provet till laboratoriet.
Kontakt	Patologens provinlämning tel 031- 342 15 16
Transport	<p>Proven kan sändas per post, skickas med internttransport eller lämnas direkt på laboratoriet. All extern transport som utförs av Transportcentral SU/Mölndal sker enligt ADR-S 6.2. Godsdeklaration skall medfölja.</p> <p>Prov skall lämnas till Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00 (om inget annat anges, se Fixering ovan) I annat fall förvaras fixerade prov i rumstemperatur tills nästa transporttillfälle.</p> <p>Akuta prov/snabbsvar lämnas direkt till lab.personal vid provinlämning.</p> <p>Hur prov skall förpackas se "Packa Provet Rätt", information från Folkhälsomyndigheten.</p>