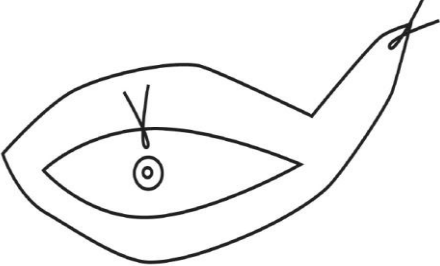
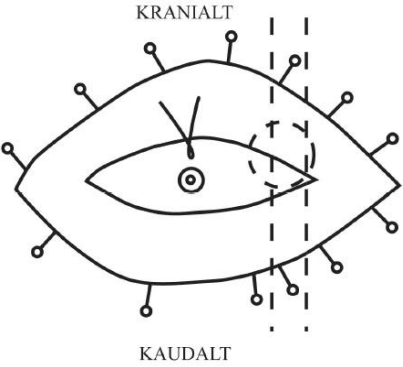


Provtagningsanvisningar Ablatio

Remiss	Remiss ifylls enligt anvisningar ” Remissanvisningar ” REMISS PAD Sahlgrenska sjukhuset
Allmänt	<p>Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och provtagningskärl/objektglas märkas med patientens personnummer (10 siffror) och namn. Observera att provtagningskärl inte får märkas på lock.</p> <p>Anmäl senast dagen innan vilka preparat som ska opereras via fax eller telefon. Kontakta ansvarig BMA vid bröstsektionen om någon patient blir struken från operationslistan. TELEFON DAGTID: 0703-323298</p>
Fixering	<p>Färskvävnadspreparat (ofixerat material)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laboratoriet kan omhänderta färskvävnadspreparat (ofixerat material) som levereras vardagar före kl 15:15. • Materialet skall packas nedkyllt med is. • Transport till laboratoriet skall ske skyndsamt (önskvärt inom en timme). • Eventuell preparatröntgen utförs före inlämningen. <p>Fixering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Övrigt material (icke-färskvävnadskrävande analys) läggs i 4 procent fosfatbuffrad formaldehydlösning (se Övrigt). • Mängden formaldehyd skall vara (5 -)10 gånger provets volym. Viktigt att även preparatets yta är övertäckt. • Material i fixeringslösning förvaras i rumstemperatur. Efter korrekt utförd förhantering (se anvisningar nedan) behövs i regel 24 timmars fixeringstid. Mindre vävnadsbitar (core-biopsier) kan fixeras på kortare tid. • För att undvika överfixeringstider bör preparatet transporteras med nästföljande möjliga tillfälle till laboratoriet för registrering och förvaring (se Transport).

<p>Utförande</p>	<p>Profylaktisk mastektomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suturmärkning och uppnålning av färskvävnadspreparat enligt anvisning (se suturmarkeringar Ablatio) • Inmärkning av korkplatta enligt ovan • Lägg korkplattan med preparatet i en plastpåse med is. • Profylaktiska preparat kan med fördel röntgenundersökas (preparatröntgen – se ovan). <p>Axillpreparat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kan insändas som färskt (ofta vid samtidig mastektomi) eller som prov fixerat i formaldehydlösning. • Om separat insänt preparat utan särskilda önskemål behövs ingen orienterande inmärkning. <p>Suturmarkeringar</p> <p>Ablatio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suture i huden, klockan tolv, ovanför mamillen (se illustration). • Suture i eventuell medföljande axilltopp.  <p>Profylaktisk och/eller subcutan mamillsparande mastektomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sutureinmärkning mot klockan tolv, ovanför mamillen (som ovan) • Sutureinmärkning av retromamillärt vävnadsområde <p>Hantering av preparat som fixeras vid operation</p> <p>Ablatio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montera preparatet på korkplatta • Skär ett snitt tvärs igenom tumören, kranial/kaudial riktning, ned till strax innan fasciahinnan. Vid stora tumörer ska två snitt skäras med ungefär två centimeters mellanrum. • Fixera preparatet. 
-------------------------	---

Övrigt	<p>Preparatröntgen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Röntgenundersökning av det avlägsnade preparatet (oftast partiell mastektomi/sektoresektat) är önskvärt på preparat med icke palpabla tumörer med/utan föregående indikering av tumören. • Avlägsnad, orienteringsmärkt bröstvävnad uppnålas på korkplatta (identitetsmärktes) före undersökningen. Orienteringen skall bevaras vid röntgenundersökningen. Eventuell preoperativ indikering av tumör kvarsitter. • Färskvävnadpreparat transporteras och handläggs skyndsamt (Se ovan). • Röntgenutlåtande samt eventuell pappersutskrift på röntgenbild skall medfölja provet till laboratoriet.
Kontakt	Patologens provinlämning tel 031- 342 15 16
Transport	<p>Proven kan sändas per post, skickas med internttransport eller lämnas direkt på laboratoriet. All extern transport som utförs av Regionsservice/Transport sker enligt ADR-S 6.2. Godsdeklaration skall medfölja.</p> <p>Prov skall lämnas till Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00 (om inget annat anges, se Fixering ovan) I annat fall förvaras fixerade prov i rumstemperatur tills nästa transporttillfälle.</p> <p>Akuta prov/snabbsvar lämnas direkt till lab.personal vid provinlämning.</p> <p>Hur prov skall förpackas se "Packa Provet Rätt", information från Folkhälsomyndigheten.</p>